


GLUBRAN®2

Applicateurs



Large gamme pour les procédures personnalisées

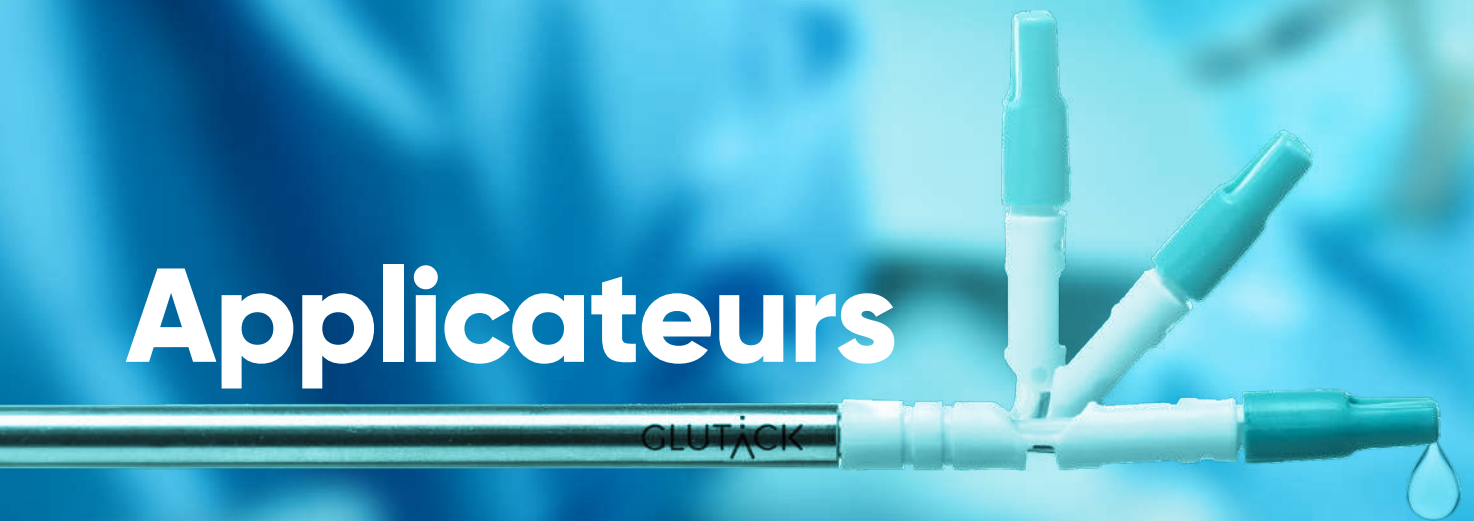

Les dispositifs **Goutte-à-goutte** sont conçus pour des applications ponctuelles de Glubran® 2 afin de tirer parti de sa propriété adhésive pour remplacer ou renforcer la suture, couvrir de petites zones, réaliser l'hémostase ou le scellement. Le produit doit être appliqué à raison d'environ une goutte par cm².


L' **Embout applicateur** pour la chirurgie ouverte est muni d'une extrémité à pinceau pour son application en fine couche. Particulièrement indiqué pour la distribution de Glubran® 2 en tant que scellant d'anastomose et pour le renforcement des sutures.

Les **Cathéters laparoscopiques flexible et rigide** sont indiqués pour la distribution goutte-à-goutte de Glubran® 2 comme agent hémostatique, colle et scellant dans les procédures chirurgicales coelioscopique.

Les **Nébuliseurs** à propulsion gazeuse autonome (spray) sont conçus pour améliorer toutes les propriétés de Glubran® 2, tant dans les procédures chirurgicales laparotomiques que laparoscopiques, grâce à la formation d'une fine couche de produit.

Nébuliseurs

- La préparation est simple et rapide
- Il s'agit de systèmes indépendants à usage unique
- Ils n'ont pas besoin de régulateurs de pression
- Ils ne sont pas reliés aux raccords d'air des salles d'opération ni aux bouteilles de CO₂
- Le gaz propulseur inerte pour la nébulisation est non toxique, biocompatible, avec une autonomie de 8 min en débit continu
- La pression de sortie est constante et contrôlée sans aucun risque d'embolie gazeuse

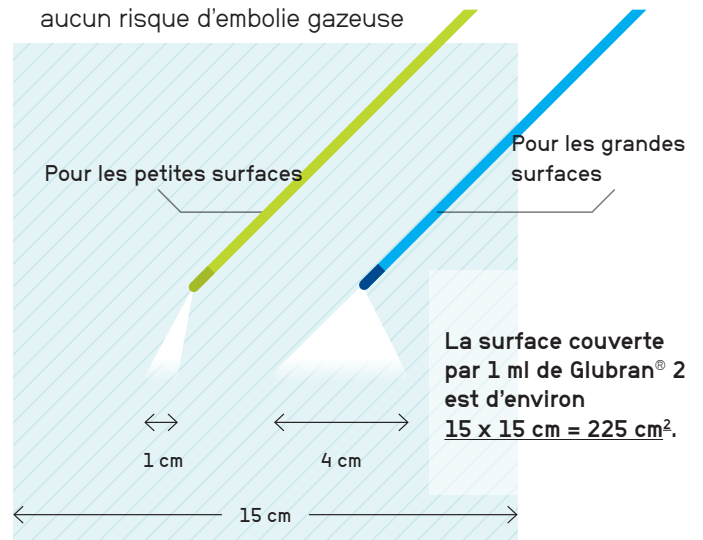

Dispositifs pour applications goutte-à-goutte



G2-DCD-210-8T



G-LLS

Embout pour applications en fine couche



G-DT

Cathéters laparoscopiques pour applications goutte-à-goutte



G2-LPC FLEXIBLE



G2-LPC-RIG RIGIDE

Nébuliseurs

APPLICATIONS

DISTANCE DU TISSU

DIAMÈTRE DE NEBULISATION

CARACTÉRISTIQUES

PROPRIETES

NÉBULISEUR
G2-NBT



5-7 cm

4 cm

Flexible, pour les grandes surfaces, facilement orientable, convient également pour la chirurgie ouverte

PETIT NÉBULISEUR
G2-NBT-SMALL



En coelioscopie thoracoscopie

2-3 cm

1 cm

Flexible, pour les petites surfaces, facilement orientable, convient également pour la chirurgie ouverte

SCELLEMENT

NÉBULISEUR RIGIDE
G2-NBT-RIG



5-7 cm

4 cm

Rigide, pour les grandes surfaces

RENFORCEMENT

NÉBULISEUR COURT
G2-NBT-SHORT



5-7 cm

4 cm

Court, pour les grandes surfaces

AÉROSTASE

BILIOSTASE

NÉBULISEUR MINI COURT
G2-NBT-SM-SHORT



En open


1 cm

1 cm

Court, pour les petites surfaces

GLUTÄCK

Dispositif laparoscopique pour la fixation atraumatique des prothèses herniaires

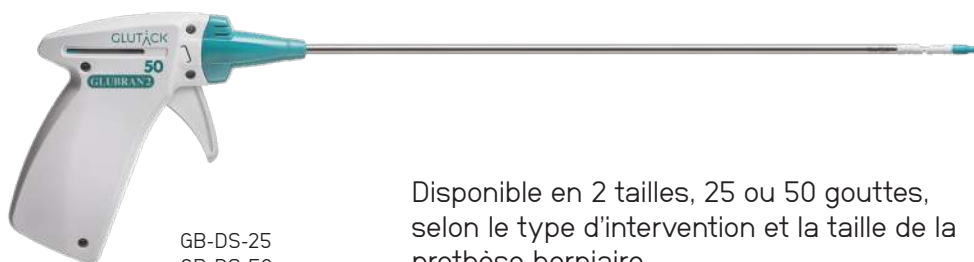

GB-DS-25
GB-DS-50

Disponible en 2 tailles, 25 ou 50 gouttes, selon le type d'intervention et la taille de la prothèse herniaire

